

更多信息请登录
www.vacuubrand.com



单级真空隔膜泵，适用于实验室单独使用或并行使用

隔膜真空泵
ME 2 NT 和 ME 2C NT

vacuubrand

专业的真空科技

单级隔膜泵是持续地、无油地抽取气体或蒸汽的优秀解决方案，用于无需很高真空度的应用。在日常使用中，与水喷射泵相比，它们不需要消耗水资源，因此也不会产生任何废水。主要应用于中等气载的真空烘箱，单联抽滤或多联抽滤。通常该设备非常适用于抽取气体和无油排气。单级的结构使泵同时具有抽气速度大和达到70mbar极限真空的优点。

■ 隔膜泵 ME 2 NT

化学真空隔膜泵是抽取腐蚀性气体或蒸汽的上乘之选。耐用的PTFE隔膜和阀门具有非常好的耐化学腐蚀性。免维护的驱动系统保证了长的隔膜寿命。

■ 化学隔膜泵 ME 2C NT


隔膜泵采用铝材质，是无油排气或抽取非腐蚀性蒸汽的正确之选。泵体由铝材质和特种塑料制成，可用作很多用途。高弹性的纤维增强的FPM双层膜片是膜片寿命长的关键所在。



Vacuum regulation valve (mbar/torr) for non-corrosive gases

性能表现

- 排气安静，振动极低
- 进行多联操作时仍有很强的吸力
- 在低真空值时仍能保持很好的性能
- 有很好的耐化学腐蚀性，尤其是ME 2C NT
- 隔膜寿命长，驱动系统免维护

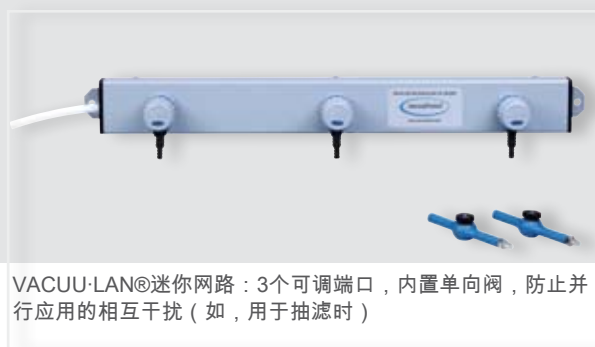

VACUU-LAN®迷你网路：3个可调端口，内置单向阀，防止并行应用的相互干扰（如，用于抽滤时）

技术参数		ME 2 NT	ME 2C NT
泵头数/级数		1 / 1	1 / 1
50/60 Hz下的最大抽速	m ³ /h	2.0/2.2	2.1/2.4
极限真空（绝压）	mbar	70	70
最大出气口压力（绝压）	bar	2	1.1
进气口接口 (IN)		DN 10 mm 软管喷嘴接头	DN 10 mm 软管喷嘴接头
出气口接口 (EX)		消音器 / G1/4"	DN 10 mm 软管喷嘴接头
额定电机功率	kW	0.18	0.18
尺寸（长x宽x高）大约	mm	243 x 211 x 198	243 x 211 x 198
重量 大约	kg	10.2	10.2

订货信息		ME 2 NT	ME 2C NT
230 V ~ 50-60 Hz		CEE 730000	730100
230 V ~ 50-60 Hz		UK 730002	730102
100-115 V ~ 50-60 Hz, 120 V ~ 60 Hz		US 730003	730103
加拿大和美国的NRTL标准			

附件	ME 2 NT
真空橡胶管 DN 10 mm (686002)	
VACUU-LAN®迷你网路 (2614455)	
带真空计的真空调节阀 (696840)	

附件	ME 2C NT
真空橡胶管 DN 10 mm (686002)	
VACUU-LAN®迷你网路 (2614455)	

普兰德（上海）贸易有限公司
 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场12 F1
 电话：+86 21 6422 2318 传真：+86 21 6422 2268
 邮箱：info@brand.cn.com 网站：www.brand.cn.com

vacuubrand

专业的真空科技