



Tecnología de vacío


¿Ha oído?


El nuevo control remoto
VACUU · CONTROL™



...¡El poder está en sus manos! ¡Control remoto vía VACUU · CONTROL™!

Disponible como un accesorio modular para todos los CVC 3000
y DCP 3000 desde la versión de software 2.0 (2009)

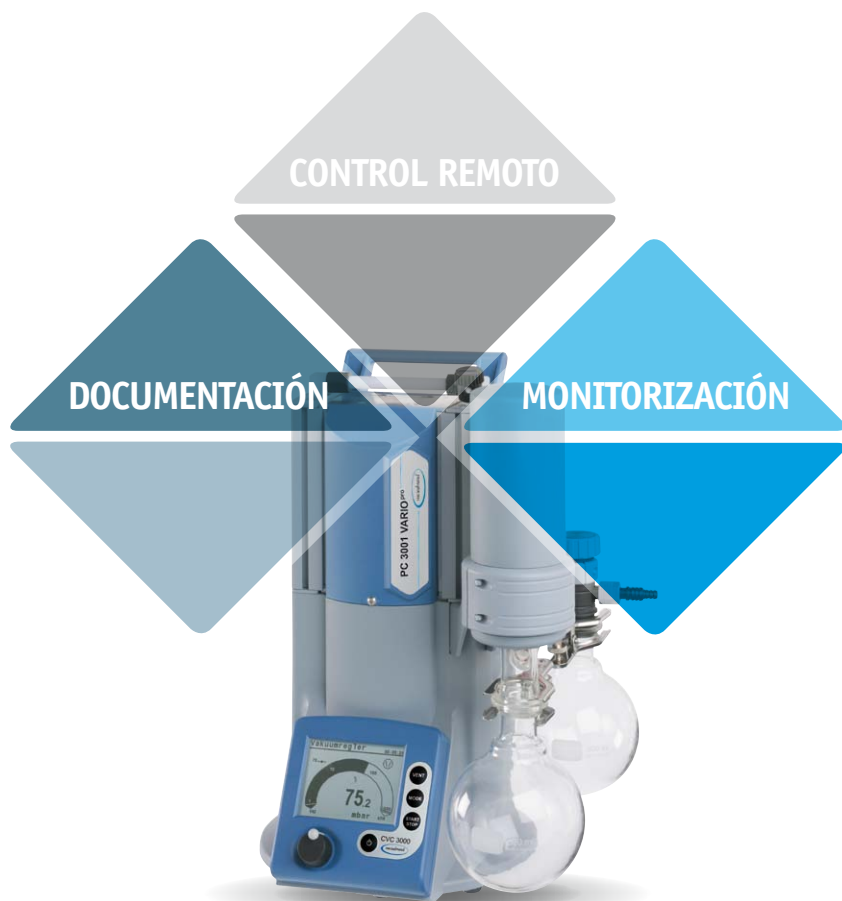

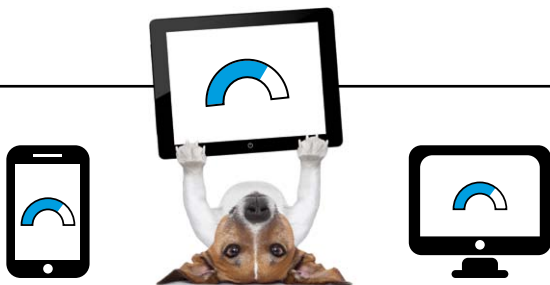

VACUU · CONTROL™ permite la monitorización y el control basados en la red de las unidades de vacío vía ordenadores o dispositivos móviles tales como Smartphones y Tabletas.

Ahora es fácil integrar su sistema de vacío en su ordenador vía el adaptador **LAN** o el adaptador **WLAN** sin cables sin necesidad de ninguna instalación adicional.

CONTROL REMOTO



La interfaz gráfica de usuario permite la monitorización clara, la documentación y el control remoto de sus sistemas de vacío.

DOCUMENTACIÓN



La función data logger integrada registra permanentemente las curvas de presión de sus aplicaciones. Esto simplifica la documentación de sus procesos.

MONITORIZACIÓN



Usted puede monitorizar los procesos de vacío en su laboratorio desde su oficina vía smartphone, tableta, laptop y PC. Así usted puede efectuar una corrección desde el software remoto en cualquier momento.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

VACUU · CONTROL™ WLAN 683110

Adaptador de control remoto WLAN para la integración en las redes de PC WLAN, con interfaz de usuario gráfica basada en la red, completo con cable para la conexión al interfaz RS 232C para CVC 3000 o DCP 3000.

VACUU · CONTROL™ LAN 683120

Adaptador control remoto LAN con conexión RJ45 para la integración en la red PC LAN, con interfaz gráfica de usuario basada en la red, completo con cable para la conexión al interfaz RS 232C para CVC 3000 o DCP 3000.

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Straße 4
97877 Wertheim

T +49 9342 808-5550
F +49 9342 808-5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com



Tecnología de vacío